


RADARMED 650+ & 950+



přístroje pro mikrovlnnou terapii

Enraf-Nonius

Enraf-nonius - výrobce profesionálních zařízení a produktů v oblasti rehabilitace a fysioterapie. Dodáváme produkty a služby v nejvyšší možné kvalitě a v souladu s nejnovějšími poznatky a technikami z oboru. Společnost byla založena roku 1925 a stala se globálním lídrem v oboru.

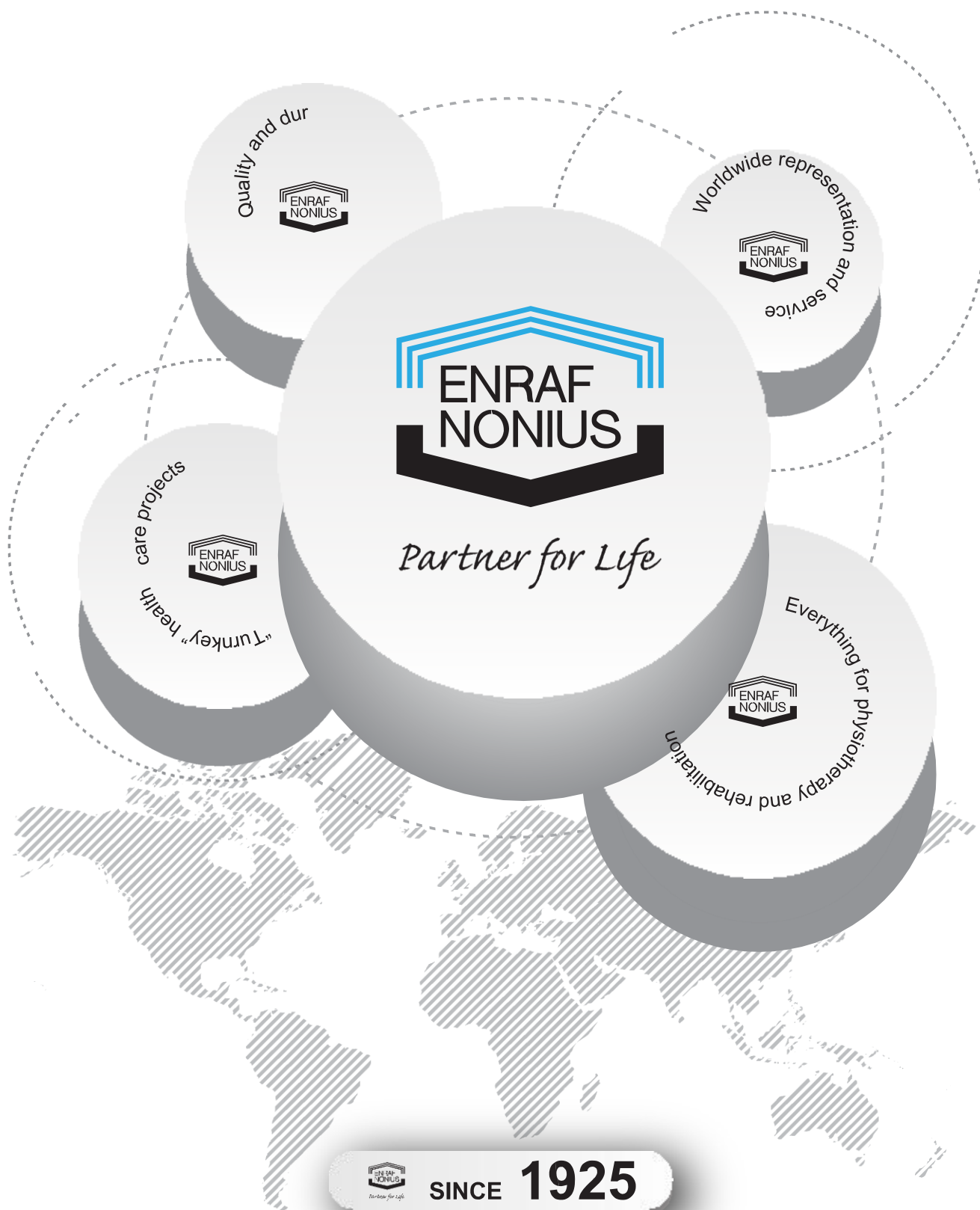

RADARMED 650+ a 950+

PŘÍSTROJ PRO MIKROVLNNOU TERAPII

Radarmed 650+ a 950+ jsou přístroje pro kontinuální a pulsní mikrovlnnou terapii s frekvencí 2450 MHz (12 cm - vlnová délka). Dávkování záření je založeno na pacientově vjemu, což je zároveň hlavní výhodou a garantem bezpečnosti mikrovlnné terapie. Aplikace mikrovlnné terapie je zároveň velice jednoduchá a nenáročná díky použití pouze jednoho aplikátoru (unipolárně). Aplikátor není s pacientem v kontaktu, je bezpečný a hygienický.



- Kontinuální a pulsní výstup
- Jednoduchý přechod z kontinuální na pulsní terapii.
- Parametry jsou přehledně zobrazeny na podsvíceném displeji.
- Parametry zůstávají vždy viditelné i při probíhající terapii.
- Volné programové pozice pro ukládání vlastních léčebných protokolů (pouze u radarmedu 950+)

RADARMED 650+ a 950+


1435901 Radarmed 650+

Přístroj pro kontinuální a pulsní mikrovlnnou terapii. Dávka záření a čas léčby jsou zobrazeny na číselném displeji a dají se snadno měnit stisknutím příslušných tlačítek.



1435911 Radarmed 950+

...stejný přístroj jako Radarmed 650+, ale s LCD displejem. Parametry jsou též zobrazeny na LCD-displeji. Ovládání je stejně intuitivní, zde pomocí centrálního ovladače a příslušných tlačítek. U tohoto přístroje lze navíc parametry a protokoly ukládat do programových pozic.

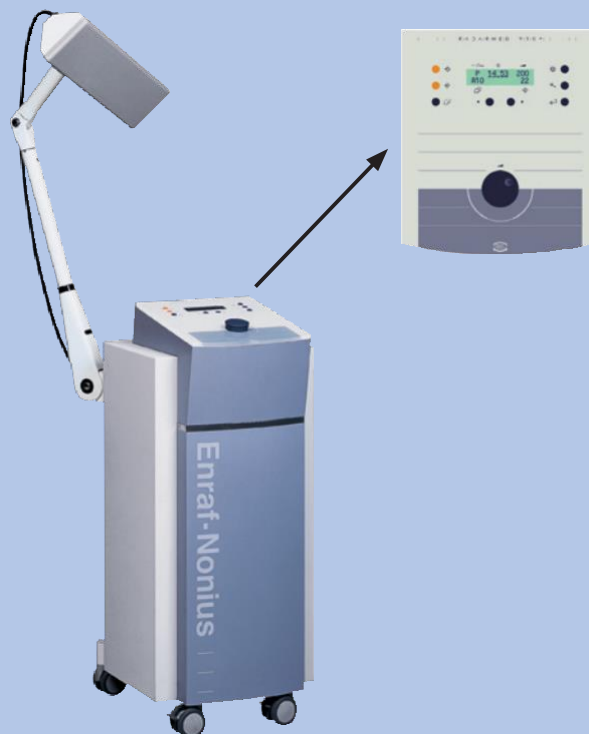

Standardní příslušenství:

- 1435750/51 Manuál k obsluze 650+/950+⁽¹⁾
- 3444298 Síťový kabel 230V-eUr
- 1409813 VF-kabel 250 Watt,
- 3442039 rameno pro aplikátor

(1) = dle modelu



Technické specifikace:

Druh terapie	kontinuální a pulsní s frekvencí
2450 MHz $\pm$ 50 MHz	
VF výkon, kontinuální:	0-250 W při 50 Ohm
VF výkon, pulsní:	0-250 W s pevným špičkovým
výkonem 1500 W, $\pm$ 30%	
Programovatelné pozice:	jen u Radarmedu 950+
Napětí sítě:	220-240 V $\pm$ 10% (50/60 Hz)
Příkon:	1000 VA
Hmotnost:	45 kg (včetně ramene)
rozměry:	93x39x49 cm (vxšxh, včetně koleček)

Příslušenství Radarmed

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1409810	Velkoplošný zářič pro Radarmed
1409811	Podélný zářič pro Radarmed
1409812	Lokální zářič Ø 17 cm pro Radarmed
3441306	Neonová testovací trubice
1480803	Přizemňovací kabel 5 m
3442022	Ochranné brýle



1409810



1409811



1409812



3441306



1480803



3442022



NÁBYTEK PRO KRÁTKOVLNNOU A MIKROVLNNOU LÉČBU

Tento nábytek je navržen speciálně pro tyto druhy léčby. Neobsahují žádný kov, takže nedojde k narušení vyzařovaného pole.

3441337 Terapeutická židle, lakovaná

3441401 Terapeutické lehátko, lakované, 190x60x75 cm


3441338 Stolička, lakovaná





Partner for Life

RADARMED 650+ & 950+

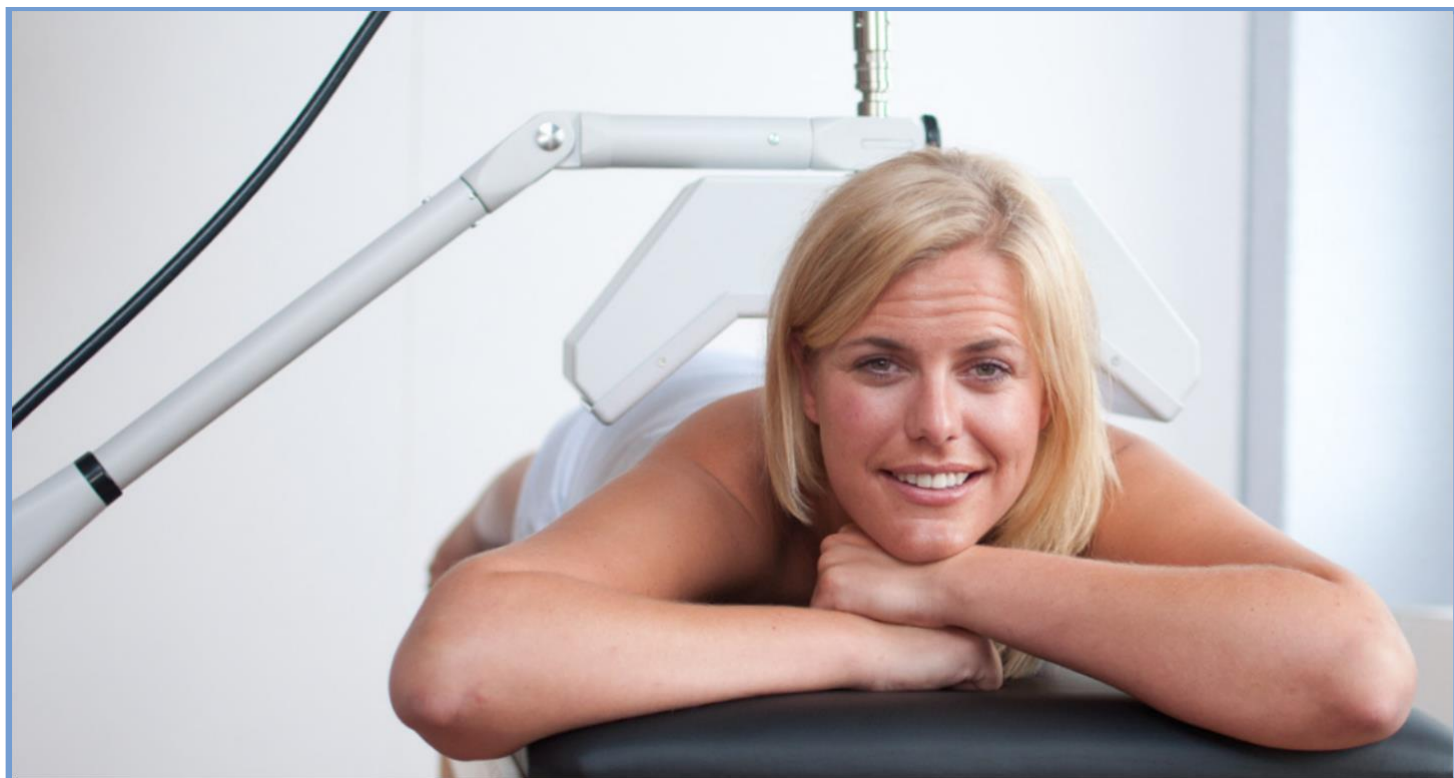

distributor a servis:

TERA-MED medical s.r.o.
Ovčáry 214
27714

tel: +420 776 49 34 34
email: tera-med@email.cz
web: www.tera-med.cz